

Tracoe Vario – REF 450

Trachealkanüle spiralverstärkt, mit verstellbarem Kanülenschild, Niederdruckcuff, Skala und 15-mm-Konnektor

Produktbeschreibung

Tracoe Vario ist eine weiche, flexible Kanüle mit verstellbarem Kanülenschild. Mittels eines praktischen Druckknopfmechanismus kann das Schild verschoben und für jeden Patienten individuell und auf die richtige Länge eingestellt werden. Eine Skala sorgt für die exakte Positionierung des Kanülenschildes bei der Vorbereitung eines Kanülenwechsels. Das Schild wird dann verriegelt, indem der orangefarbene Hebel nach oben geschoben wird. Eine Verriegelung mit einem Drehverschluss ist nicht mehr notwendig. Tracoe Vario Kanülen bestehen aus DEHP-freiem, medizinischem PVC und sind mit und ohne Sprial-Verstärkung erhältlich. Das Sortiment umfasst sowohl Standard- als auch extralange Ausführungen.



Lieferumfang

- Obturator
- Verstellbares Kanülentrageband
- Produktinformationskarte mit zwei abnehmbaren Etiketten.

Allgemeine Informationen

Produktlinie	Vario
Gesetzlicher Hersteller	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Deutschland
Herkunftsland	Deutschland
Farbcodierung	
Handhabung	
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre ab Produktionsdatum
Maximale Nutzungsdauer	29 Tage ab Erstgebrauch

Verpackung

Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht	Siehe Tabelle
Abmessungen (B x H x L)	210 x 113 x 50 mm
Material Außenverpackung:	Pappkarton
Material Sterilverpackung:	Sterilbeutel mit medizinischem Papier und transparenter, heißsiegelfähiger PET/PP-Folie

Materialspezifikationen

Material Außenkanüle	Polyvinylchlorid
Material Kanülenschild	Polysulfon/TPE
Material Cuff	Polyvinylchlorid
Biokompatibilität	EN ISO 10993-1



Lagerung



Zertifizierung


Produktklassifizierung lt. MDR	IIb
CE-Kennzeichnung	
GMDN	47657
Qualitätssystem zertifiziert nach	EN ISO 13485
FDA-Zulassung	Zulassungsnummer K203362

Produktpalette

Größe	REF	ID	OD	TL (TL Min-TL Max)	OB	BA	CD	Brutto- gewicht	GTIN
	REF	mm	mm	mm	mm	°	mm	g	
06	REF 450-06	6,0	8,2	50,0–62,0	76	100	18,0	190	04035324012275
07	REF 450-07	7,0	9,7	53,0–68,0	86	100	23,0	193	04035324012282
08	REF 450-08	8,0	11,2	64,0–84,0	97	100	28,0	197	04035324012299
09	REF 450-09	9,0	12,3	66,0–93,0	106	100	30,0	200	04035324012305
10	REF 450-10	10,0	13,7	63,0–98,0	120	100	32,0	205	04035324012329
11	REF 450-11	11,0	14,8	68,0–103,0	121	100	34,0	209	04035324012336

Legende

ID	Innendurchmesser an der Kanülenspitze
OD	Außendurchmesser an der Kanülenspitze
TL MIN	Mindestlänge entlang des Mittelbogens
TL MAX	Maximallänge entlang des Mittelbogens
OB	Länge entlang des Außenbogens
BA	Biegewinkel
CD	Cuffdurchmesser

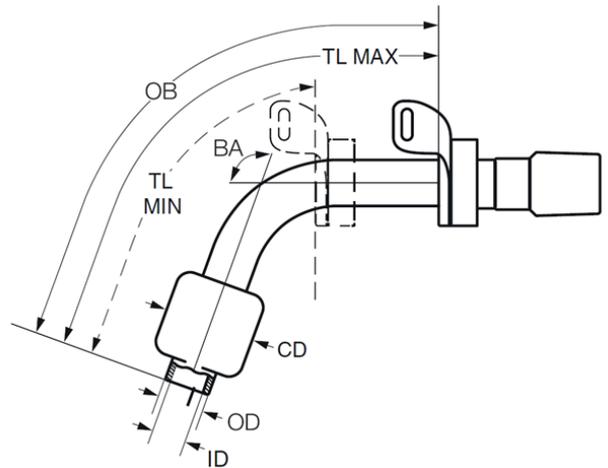

Atos

Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB
 Hyllie Boulevard 17
 215 32 Malmö
 Schweden
www.atosmedical.com